

检验检测报告

扫码下载报告



No: 220036176

 防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: REJK-0706-34

共5页 第1页

委托单位	湖南臻和亦康医疗用品有限公司 地址: 湖南省湘潭市高新区双马街道霞光东路55号湖南京湘节能科技园生产装备车间6栋		
客户认定信息	一次性使用普通医用口罩 40个 批号: 20220108 生产日期: 2022.1.8 型号规格: 100mm×180mm 生产单位: 湖南臻和亦康医疗用品有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2022-02-22
		报告签发日期	2022-03-11
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	外观[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	结构与尺寸[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	口罩带[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	通气阻力	YY/T 0969-2013	符合
	无菌试验	YY/T 0969-2013	符合
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
环氧乙烷残留量	YY/T 0969-2013	符合	
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘丽琴 高级工程师




样品图片

No:220036176


共5页 第2页



样品图片

No:220036176

共5页 第3页

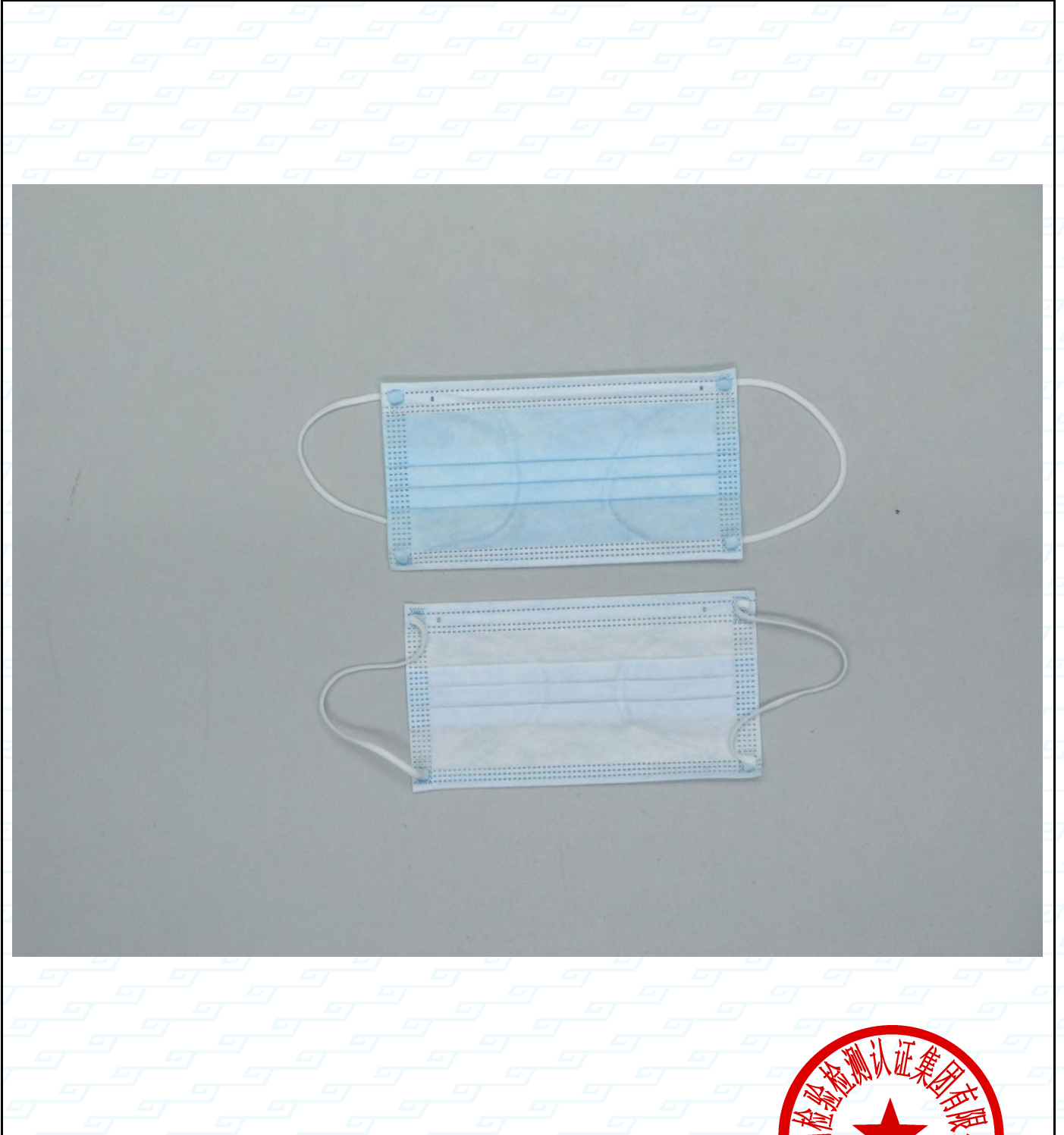

检验检测报告附页

No: 220036176

共5页 第4页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●外观[3个]	YY/T 0969-2013 5.1	口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合	---
●结构与尺寸 [3个]	YY/T 0969-2013 5.2	口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸，最大偏差应不超过±5%。	结构： 符合要求 尺寸最大偏差(%)： -5	符合	---
●鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013 5.3	口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。	鼻夹： 符合要求 鼻夹长度(cm)： 1# 10.7 2# 10.7 3# 10.6	符合	---
●口罩带[3个]	YY/T 0969-2013 5.4	口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	---
●通气阻力 (Pa/cm ²)	YY/T 0969-2013 5.6	≤49	1# 20.8 2# 21.8 3# 18.8	符合	---
●无菌试验	GB/T 14233.2-2005 条款3	无菌	无菌生长	符合	---
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种： 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积：49cm ² 气体流速：28.3L/min 平均颗粒直径：3.0 μm 阳性质控值： 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值： <1CFU	≥95	BFE ₁ 99.2 BFE ₂ 99.7 BFE ₃ 99.5	符合	---
备 注	(本栏空白)				



检验检测报告附页

No: 220036176

共5页 第5页

检验检测项目: 环氧乙烷残留量				
测试方法: GB/T 14233.1-2008				
物质名称	化学文摘编号	标准要求 (μ g/g)	检出限 (μ g/g)	检验检测结果 (μ g/g)
环氧乙烷	75-21-8	≤ 10	0.5	2.2
说明	该项目按照YY/T 0969-2013标准判定。			
本项判定	符合			

——本报告结束——



注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。

Note

1. The report is invalid without authorized stamp.
2. Copies of this report are invalid without authorized stamp.
3. Any dispute should be raised within 15 days after receiving the report.
4. The result is only valid for the tested sample.
5. The results of unapproved items are for reference only.
6. This report is invalid if altered.
7. Our company does not accept any responsibility for the authenticity of the information supplied by customers (including sample information).
8. The report shall not be duplicated separately or partly, without prior written permission approved by GTTC, except duplicated in full version.